

Hodge Parents - Please check your child's backpack today and find an at-home COVID-19 test kit. Each student received one kit containing two tests. These tests are for you to use for your student as you see fit. We recommend you use the test after possible exposure to a positive COVID-19 case. You do not need to report negative test results. Positive results should be reported to your student's school.

If your student is not at school when the kits are distributed, they can pick up their kit at the school office when they return.

The directions included in the box ask parents to download the iHealth app and report test results. This is **NOT** required. We only ask that parents report a positive result to the student's school.

How To Instructions and Links to the instructional video on how to administer the test are included in this email.

These will be the only test kits given to your student. Please use them accordingly.

Links for Instructional Video:

https://www.youtube.com/watch?v=qBt_H4Gc-rU&authuser=0

<https://www.youtube.com/watch?v=gazlCb3HAQI&authuser=0>

iHealth COVID-19 Test

AT-HOME TESTING INSTRUCTIONS

Each student will receive 1 test kit containing two tests. These tests are for you to use for your student as you see fit. However, we recommend you use the test after possible exposure to a positive COVID case. You do not need to report negative tests results. Positive results should be reported to your student's school.

1

SWAB

Gently insert the swab into nose and circle the swab, touching all sides of the nostril 5 times each side, for 15 seconds each side.



Right Nostril



Left Nostril

2

TAP & TWIST TUBE

Tap the tube vertically on the table and twist open the large orange cap.



3

STIR SWAB


Insert the swab into the tube until touching test tube bottom with the swab tip. Stir at least 15 times.



4

SQUEEZE TUBE & REMOVE SWAB

Squeeze the sides of the tube to remove as much liquid as possible from the swab. Remove the swab.

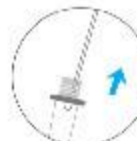

5

CAP THE TUBE

Screw back the large orange cap. Put the swab back into the package and throw the swab away.



Pruebas para COVID-19

INSTRUCCIONES PARA HACER LA PRUEBA EN CASA

Cada estudiante recibirá un kit que contiene dos pruebas. Estas pruebas son para que usted las utilice para su estudiante según le parezca oportuno. Sin embargo, le recomendamos que utilice la prueba después de una posible exposición a un caso positivo de COVID. No es necesario que informe de los resultados negativos de las pruebas.

1

FROTE

Suavemente, coloque el hisopo solo media pulgada dentro de la fosa nasal. Frote en moción circular dentro de la nariz por 15 segundos en cada lado de la nariz. Repita en la otra fosa nasal.



Fosa nasal derecha



Fosa nasal izquierda

2

GOLPEE LIGERAMENTE Y ABRA LA TAPA DEL TUBO

Dele un golpecito ligero al tubo verticalmente sobre una mesa y gire para abrir la tapa anaranjada.



3

REVUELVA EL HISOPO

Ponga el hisopo dentro del tubo hasta que el punto del hisopo toque el fondo del tubo. Revuelva el hisopo en el tubo por lo menos 15 veces.



4

APRIETE EL TUBO Y RETIRE EL HISOPO

Apriete los lados del tubo para remover



Colección de Muestra

tire el hisopo de su paquete, teniendo cuidado de no tocar la punta del hisopo. Guarde el paquete del hisopo para usarlo más adelante.



serte suavemente toda la punta absorbente del sopo (generalmente de 1/2 a 3/4 de pulgada) en la fosa nasal.



Nota: En el caso de los niños, la profundidad máxima de la inserción en la fosa nasal puede ser inferior a 3/4 de pulgada y es posible que necesite una segunda persona sujetar la cabeza del niño mientras se limpia.

Apriete con firmeza y lentamente el interior de la fosa nasal con un movimiento circular contra la pared nasal al menos 5 veces. Tómese al menos 15 segundos para recolectar la muestra y asegúrese de recolectar cualquier drenaje nasal en el hisopo. En el mismo hisopo, repita lo mismo procedimiento de recolección de la muestra para la otra fosa nasal. Asegúrese de cepillar AMBAS fosas nasales con el MISMO HISPANO.



Fosa nasal derecha

Fosa nasal izquierda


Nota: Si se limpia correctamente, se pueden producir resultados negativos falsos.

Muestra de Proceso

Apriete el tubo verticalmente sobre la mesa y gire la tapa naranja grande para abrir el tubo.



c. Apriete los lados del tubo para extraer la mayor cantidad de líquido posible del hisopo y retírelo.

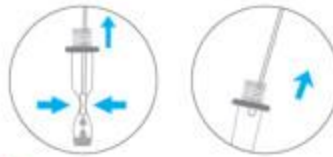

Nota: Si no aprieta el hisopo, es posible que no haya suficiente material de muestra para realizar la prueba correctamente (es decir, lo que podría dar como resultado un resultado falso negativo).

d. Vuelva a enroscar la tapa naranja grande y vuelva a colocar el hisopo en el paquete. Deseche de forma segura el hisopo y el paquete.



4 Agregar Muestra

Gire para abrir la pequeña tapa blanca del tubo. Agregue 3 gotas de muestra al puerto de muestra de la tarjeta de prueba COVID-19. Vuelva a atornillar la pequeña tapa blanca.



Nota: Puede producirse un resultado falso negativo o no válido si se agrega muy poca solución a la tarjeta de prueba.


5 Espere 15 minutos

Inicie el temporizador haciendo clic en el botón "Iniciar temporizador", inmediatamente después de

6 Leer Resultado

Los resultados no deben leerse después de 30 minutos (el resultado se muestra con un aumento de 2x).

Nota: Puede producirse un resultado falso negativo o falso positivo si el resultado de la prueba se lee antes de minutos o después de 30 minutos.

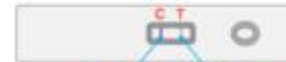

Mira cuidadosamente para una línea C aquí.

Mira cuidadosamente para una línea T aquí.

Nota: La línea T puede ser extremadamente débil.

7 Explicación del Resultado de la Prueba

Resultado Positivo



Un resultado POSITIVO debe mostrar AMBAS una línea C y una línea T. Un resultado positivo significa que se detectaron antígenos virales de COVID-19; el individuo es positivo para COVID-19.

A continuación se muestran fotos de pruebas positivas reales. Tenga en cuenta que la línea T puede ser tenue.



Las personas que dan positivo en la prueba deben aislarse y buscar atención de seguimiento con su médico o proveedor de atención médica, ya que pueden ser necesarias pruebas adicionales e informes de salud pública.

Resultado Negativo



Test Set 2: Open the package, take out the COVID-19 Test Card in Pouch, empty Tube, sealed Solution and the Swab. When you are ready to proceed with the test, open the foil pouch of the COVID-19 Test Card.



COVID-19 Test Card in Pouch



1 Empty Tube and 1 Sealed Solution



1 Swab

Please look carefully, there are **two Edges** on the empty tube. Then squeeze the sealed solution completely into the empty tube.



Please confirm the liquid level with or above Edge 2. Then go to **Step 2 Collect Sample**.



Note: It is acceptable if the liquid level is above Edge 2. However, please do not proceed with this test, if the liquid level is below Edge 2, as this may result in false or invalid results.

2 Collect Sample

Remove the swab from its package, being careful not to touch the tip of the swab. Please keep the swab package for later use.



Gently insert the entire absorbent tip of the swab (usually 1/2 to 3/4 of an inch) into your nostril.



Note: With children, the maximum depth of insertion into the nostril may be less than 3/4 of an inch, and you may

3 Process Sample


a. Tap the tube vertically on the table and twist the large orange cap to open the tube.



b. Insert the swab into the tube, touch the bottom of the tube with the swab tip, and stir at least 15 times.



c. Squeeze the sides of the tube to express as much liquid as possible from the swab, and then remove the swab.

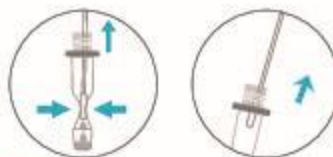

Note: If you don't squeeze the swab, there may not be sufficient sample material to perform the test properly (i.e., potentially resulting in a false negative result).

d. Screw back the large orange cap, put the swab back into the package. Safely dispose of the swab and the package.



5 Wait 15 Minutes

Start the timer by clicking the "Start Timer" button in the App, immediately after adding sample to the Sample Port. The result will be ready in 15 mins.




Note: Do NOT interpret your test result until after you 15-min timer has completed, as the T line may take as long as 15 minutes to appear.

6 Read Result

Results should not be read after 30 minutes (Results shown at 2x magnification).

Note: A false negative or false positive result may occur if the test result is read before 15 minutes or after 30 minutes.

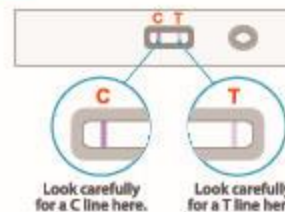

Note: The T line can be extremely faint.

7 Test Result Explanation

Positive Result



A POSITIVE result must show BOTH a C line and a T line. A positive result means that viral antigens COVID-19 were detected and the individual is positive for COVID-19.

Below are photos of actual positive tests. Please note that the T line may be faint.

